




## BANDAGE HERNIAIRE

### « MODELE 603 SIMPLE AVEC SOUS CUISSE B2N »

ORMIHL

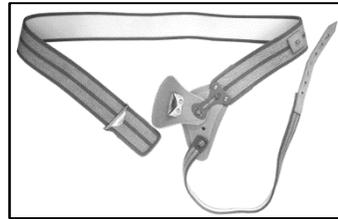

#### Fonctions

Contention de la hernie et stabilisation de son évolution.

#### Indications et usages

Hernie inguinale de taille petite ou moyenne.  
Stabilisation de l'évolution.

#### Précautions

Dispositif médical de classe I. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur. Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit. Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle. Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.). Après deux ans d'utilisation les ressorts risquent de se détendre et il y a lieu de consulter un applicateur qui vérifiera l'efficacité de l'appareil. Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence.

#### Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri



de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière. Entretien des éléments textiles :  
Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

#### Caractéristiques

Bandage herniaire souple sans ressort. Bandage unilatéral pour hernie inguinale. Pelote anatomique fixée par crémaillère métallique pour un positionnement précis. Ceinture élastique 50mm. Fermeture par boucle métallique réglable. Sous-cuisse élastique reliant la pointe de la pelote à la ceinture.

#### Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien. Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie. Premier réglage, mise en place et explications par un orthésiste compétent. La hernie doit avoir été réduite par un "taxis" en position allongée avant la mise en place. Dans cette même position, passer le bandage autour de l'abdomen et centrer la pelote sur la hernie, de préférence par-dessus un sous-vêtement. Boucler la ceinture et le sous-cuisse de manière à ce qu'ils exercent une certaine tension.

#### Tableau des tailles

Taille	Circonférence hanches	Code ACL Côté gauche	Code ACL Côté droit	Coloris
T1	75cm	37600 3544044 4	37600 3544041 3	Gris chiné
T2	80cm	34015 7583275 6	34010 7583192 1	
T3	85cm	34015 7583281 7	34015 7583200 8	
T4	90cm	34015 7583298 5	34015 7583217 6	
T5	95cm	34015 7583306 7	34015 7583223 7	
T6	100cm	34015 7583312 8	34015 7583246 6	
T7	105cm	34015 7583329 6	34015 7583252 7	
T8	110cm	34015 7583335 7	34015 7583269 5	
T9	115cm	37600 3544045 1	37600 3544042 0	
T10	120cm	37600 3544046 8	37600 3544043 7	


**Composition**  
Coton,  
polyester,  
gomme,  
acier, cuir



## BANDAGE HERNIAIRE

### « MODELE 603 SIMPLE AVEC SOUS CUISSE B2N »

ORMIHL

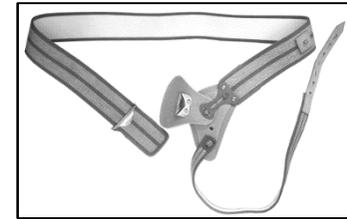

#### Fonctions

Contention de la hernie et stabilisation de son évolution.

#### Indications et usages

Hernie inguinale de taille petite ou moyenne.  
Stabilisation de l'évolution.

#### Précautions

Dispositif médical de classe I. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur. Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit. Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle. Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.). Après deux ans d'utilisation les ressorts risquent de se détendre et il y a lieu de consulter un applicateur qui vérifiera l'efficacité de l'appareil. Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence.

#### Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri



de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière. Entretien des éléments textiles :  
Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

#### Caractéristiques

Bandage herniaire souple sans ressort. Bandage unilatéral pour hernie inguinale. Pelote anatomique fixée par crémaillère métallique pour un positionnement précis. Ceinture élastique 50mm. Fermeture par boucle métallique réglable. Sous-cuisse élastique reliant la pointe de la pelote à la ceinture.

#### Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien. Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie. Premier réglage, mise en place et explications par un orthésiste compétent. La hernie doit avoir été réduite par un "taxis" en position allongée avant la mise en place. Dans cette même position, passer le bandage autour de l'abdomen et centrer la pelote sur la hernie, de préférence par-dessus un sous-vêtement. Boucler la ceinture et le sous-cuisse de manière à ce qu'ils exercent une certaine tension.

#### Tableau des tailles

Taille	Circonférence hanches	Code ACL Côté gauche	Code ACL Côté droit	Coloris
T1	75cm	37600 3544044 4	37600 3544041 3	Gris chiné
T2	80cm	34015 7583275 6	34010 7583192 1	
T3	85cm	34015 7583281 7	34015 7583200 8	
T4	90cm	34015 7583298 5	34015 7583217 6	
T5	95cm	34015 7583306 7	34015 7583223 7	
T6	100cm	34015 7583312 8	34015 7583246 6	
T7	105cm	34015 7583329 6	34015 7583252 7	
T8	110cm	34015 7583335 7	34015 7583269 5	
T9	115cm	37600 3544045 1	37600 3544042 0	
T10	120cm	37600 3544046 8	37600 3544043 7	

**Composition**  
Coton,  
polyester,  
gomme,  
acier, cuir

## Groupe SOBER SAS

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France  
Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06

Contact commercial : [commercial@sober.fr](mailto:commercial@sober.fr) - Contact utilisateur : [groupesoberetvous@sober.fr](mailto:groupesoberetvous@sober.fr)

Date de mise à jour de la fiche : janvier-18 - Année d'apposition du marquage CE : 2016



[www.sober.fr](http://www.sober.fr)

## Groupe SOBER SAS

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France  
Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06

Contact commercial : [commercial@sober.fr](mailto:commercial@sober.fr) - Contact utilisateur : [groupesoberetvous@sober.fr](mailto:groupesoberetvous@sober.fr)

Date de mise à jour de la fiche : janvier-18 - Année d'apposition du marquage CE : 2016

