



## DISPOSITIF DE FIXATION COMPLET POUR PATIENT PERTURBE ET AGITE « STABILITY GLOBAL »

FAGOFIX / FAG

### Fonctions

Maintien au lit des personnes perturbés et agitées

### Indications et usages

Ce système permet au patient de conserver une liberté de mouvement presque totale tout en empêchant les chutes hors du lit.

Les positions ventrale, dorsale, latérale ou semi-assis restent possibles.



### Précautions

Dispositif médical de classe I.

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur.

Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit.

Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle.

Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.).

Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence.

Surveiller le patient toutes les heures. Pose & utilisation uniquement sur prescription médicale.

Veiller à serrer les sangles modérément afin de ne pas blesser le patient.

Vérifier que le réglage des attaches poignets, chevilles & taille soit bien fait de façon à ce que le patient ne puisse pas s'extraire des attaches.

Ne pas passer les perfusions ou autres entre la sangle de maintien et le patient.

Ne pas les laisser à la portée de ce dernier. Pour plus de sécurité, mettre les barrières de lit.

Ne pas laisser les clés aimantées à la portée du patient.

Vérifier que les fermetures magnétiques soient bien verrouillées.

Pour les patients très agités et/ou très perturbés, utiliser impérativement le dispositif complet.

### Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière.

Lavage : lingerie industrielle : lavage à froid.

Séchage à 90° : risque de rétrécissement.

Attention : Bien enlever les fermetures et clés magnétiques.

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

### Composition

Coton, polyester, PVC, polyamide, acier nickelé, polyuréthane

### Tableau des tailles :

| Paire d'attaches-poignets capitonnée STABILITY GLOBAL |         |                 |
|---|---------|-----------------|
| Taille  | Coloris | Code ACL        |
| Universelle   | Beige   | 37600 3544187 8 |

## Groupe SOBER SAS

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France

Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06

Contact commercial : [commercial@sober.fr](mailto:commercial@sober.fr) - Contact utilisateur : [groupesoberetvous@sober.fr](mailto:groupesoberetvous@sober.fr)

Date de mise à jour de la fiche : mai-17 - Année d'apposition du marquage CE : 2016



## DISPOSITIF DE FIXATION COMPLET POUR PATIENT PERTURBE ET AGITE « STABILITY GLOBAL »

FAGOFIX / FAG

### Fonctions

Maintien au lit des personnes perturbés et agitées

### Indications et usages

Ce système permet au patient de conserver une liberté de mouvement presque totale tout en empêchant les chutes hors du lit.

Les positions ventrale, dorsale, latérale ou semi-assis restent possibles.



### Précautions

Dispositif médical de classe I.

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur.

Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit.

Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle.

Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.).

Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence.

Surveiller le patient toutes les heures. Pose & utilisation uniquement sur prescription médicale.

Veiller à serrer les sangles modérément afin de ne pas blesser le patient.

Vérifier que le réglage des attaches poignets, chevilles & taille soit bien fait de façon à ce que le patient ne puisse pas s'extraire des attaches.

Ne pas passer les perfusions ou autres entre la sangle de maintien et le patient.

Ne pas les laisser à la portée de ce dernier. Pour plus de sécurité, mettre les barrières de lit.

Ne pas laisser les clés aimantées à la portée du patient.

Vérifier que les fermetures magnétiques soient bien verrouillées.

Pour les patients très agités et/ou très perturbés, utiliser impérativement le dispositif complet.

### Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière.

Lavage : lingerie industrielle : lavage à froid.

Séchage à 90° : risque de rétrécissement.

Attention : Bien enlever les fermetures et clés magnétiques.

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

### Composition

Coton, polyester, PVC, polyamide, acier nickelé, polyuréthane

### Tableau des tailles :

| Paire d'attaches-poignets capitonnée STABILITY GLOBAL |         |                 |
|---|---------|-----------------|
| Taille  | Coloris | Code ACL        |
| Universelle   | Beige   | 37600 3544187 8 |

## Groupe SOBER SAS

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France

Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06

Contact commercial : [commercial@sober.fr](mailto:commercial@sober.fr) - Contact utilisateur : [groupesoberetvous@sober.fr](mailto:groupesoberetvous@sober.fr)

Date de mise à jour de la fiche : mai-17 - Année d'apposition du marquage CE : 2016





**DISPOSITIF DE FIXATION COMPLET POUR PATIENT  
PERTURBE ET AGITE « STABILITY GLOBAL »**  
FAGOFIX / FAG



**Mise en place**

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.  
Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie.

Dispositif d'attaches-chevilles capitonnée STABILITY GLOBAL :

MF4263 :

- 1) Positionner les poignets ou les chevilles sur la fourrure synthétique des capitons.
- 2) Fermer les capitons sur les poignets ou les chevilles puis bloquer les attaches en passant 1 œillet de la sangle dans la partie mâle des fermetures magnétiques boucle + pivot.
- 3) A l'aide des sangles, faire le tour des capitons.
- 4) Puis, avec ces mêmes sangles, faire le tour du cadre du lit et repasser 1 œillet dans la partie mâle des fermetures magnétiques boucle + pivot. Verrouiller le tout à l'aide du chapeau des fermetures magnétiques boucle + pivot.

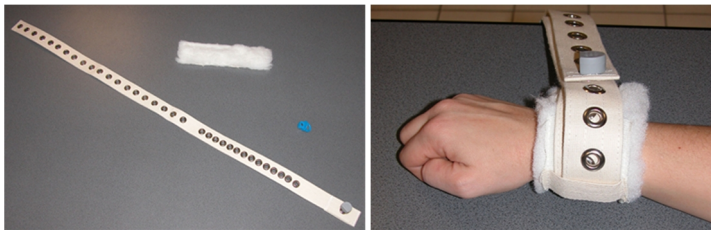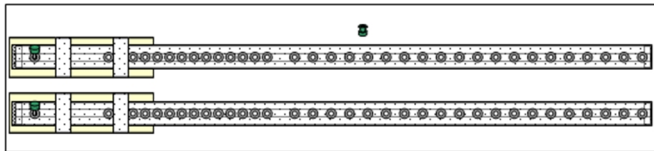

**DISPOSITIF DE FIXATION COMPLET POUR PATIENT  
PERTURBE ET AGITE « STABILITY GLOBAL »**  
FAGOFIX / FAG


**Mise en place**

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.  
Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie.

Dispositif d'attaches-chevilles capitonnée STABILITY GLOBAL :

MF4263 :

- 1) Positionner les poignets ou les chevilles sur la fourrure synthétique des capitons.
- 2) Fermer les capitons sur les poignets ou les chevilles puis bloquer les attaches en passant 1 œillet de la sangle dans la partie mâle des fermetures magnétiques boucle + pivot.
- 3) A l'aide des sangles, faire le tour des capitons.
- 4) Puis, avec ces mêmes sangles, faire le tour du cadre du lit et repasser 1 œillet dans la partie mâle des fermetures magnétiques boucle + pivot. Verrouiller le tout à l'aide du chapeau des fermetures magnétiques boucle + pivot.

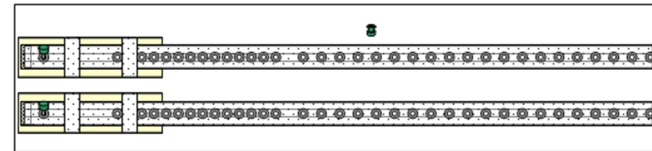

**Groupe SOBER SAS**

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France  
Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06  
Contact commercial : [commercial@sober.fr](mailto:commercial@sober.fr) - Contact utilisateur : [groupesoberetvous@sober.fr](mailto:groupesoberetvous@sober.fr)

Date de mise à jour de la fiche : mai-17 - Année d'apposition du marquage CE : 2016

[www.sober.fr](http://www.sober.fr)



**Groupe SOBER SAS**

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France  
Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06  
Contact commercial : [commercial@sober.fr](mailto:commercial@sober.fr) - Contact utilisateur : [groupesoberetvous@sober.fr](mailto:groupesoberetvous@sober.fr)

Date de mise à jour de la fiche : mai-17 - Année d'apposition du marquage CE : 2016

[www.sober.fr](http://www.sober.fr)

