



SUSPENSOIR FOURREAU POCHE INTERCHANGEABLE « 822 CELENO »

822 / ORMIHL



Fonctions

Immobilisation et soutien antalgique des testicules.

Indications et usages

Algie scrotales / hydrocèle.

Précautions

Dispositif médical de classe I.

Sur prescription médicale stricte.

Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par le grand public.

Ce produit doit être posé par un personnel qualifié apte à apprendre au patient et à son entourage les gestes essentiels à une bonne mise en place ainsi que les contraintes inhérentes au produit. Seul le médecin prescripteur décidera de la durée d'utilisation. Le médecin prescripteur s'assurera de l'absence de gêne pour le patient et de l'efficacité thérapeutique. Le patient devra être suivi régulièrement. Le dispositif ne devra pas être mis directement en contact avec une plaie, éviter le contact direct avec la peau et tous corps gras (pommade). La mise en place du dispositif est essentielle à son bon fonctionnement, suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit. Consulter votre médecin traitant ou thérapeute avant de modifier le réglage de l'orthèse et en cas d'inconfort, d'augmentation de la douleur, d'irritations, d'allergies ou de tout autre problème. Des problèmes peuvent survenir lors d'un excès de serrage des sangles.

Ce produit est à usage strictement personnel. La réutilisation du dispositif sur d'autres patients est interdite. Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence.

Caractéristiques

Suspensoir fourreau avec 2 poches jersey interchangeable.

Ceinture en tresse élastique 25mm.

Sous-cuisses réglables sur anneaux. Ceinture en 100 cm, réglable.

Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.

Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie.

Passer la ceinture autour de l'abdomen au niveau de la taille.

Serrer la boucle sans tension excessive.

Abaisser la poche au niveau de la verge et passer cette dernière dans l'orifice prévu à cet effet.

Mettre en place les testicules dans la poche et fixer les sous-cuisses à la ceinture sans tension excessive.

Tableau des tailles :

Taille	Mesure de la base de la verge jusque sous le périnée (cm)	Hauteur ceinture (cm)	Code ACL	Coloris
T1	11	2.5	34010 6051872 1	Blanc
T2	12		34010 6051889 9	
T3	13.5		34010 6051895 0	
T4	15		34010 6051903 2	
T5	16		34010 6051926 1	
T6	17.5		34010 6607625 6	
T7	19.5		34010 6607631 7	
T8	21		34010 6051932 2	
T9	23		34010 6051949 0	
T10	25.5		34010 6051955 1	
T11	28		34010 6051961 2	
T12	30		34010 6051978 0	



SUSPENSOIR FOURREAU POCHE INTERCHANGEABLE « 822 CELENO »

822 / ORMIHL



Fonctions

Immobilisation et soutien antalgique des testicules.

Indications et usages

Algie scrotales / hydrocèle.

Précautions

Dispositif médical de classe I.

Sur prescription médicale stricte.

Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par le grand public.

Ce produit doit être posé par un personnel qualifié apte à apprendre au patient et à son entourage les gestes essentiels à une bonne mise en place ainsi que les contraintes inhérentes au produit. Seul le médecin prescripteur décidera de la durée d'utilisation. Le médecin prescripteur s'assurera de l'absence de gêne pour le patient et de l'efficacité thérapeutique. Le patient devra être suivi régulièrement. Le dispositif ne devra pas être mis directement en contact avec une plaie, éviter le contact direct avec la peau et tous corps gras (pommade). La mise en place du dispositif est essentielle à son bon fonctionnement, suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit. Consulter votre médecin traitant ou thérapeute avant de modifier le réglage de l'orthèse et en cas d'inconfort, d'augmentation de la douleur, d'irritations, d'allergies ou de tout autre problème. Des problèmes peuvent survenir lors d'un excès de serrage des sangles.

Ce produit est à usage strictement personnel. La réutilisation du dispositif sur d'autres patients est interdite. Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence.

Caractéristiques

Suspensoir fourreau avec 2 poches jersey interchangeable.

Ceinture en tresse élastique 25mm.

Sous-cuisses réglables sur anneaux. Ceinture en 100 cm, réglable.

Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.

Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie.

Passer la ceinture autour de l'abdomen au niveau de la taille.

Serrer la boucle sans tension excessive.

Abaisser la poche au niveau de la verge et passer cette dernière dans l'orifice prévu à cet effet.

Mettre en place les testicules dans la poche et fixer les sous-cuisses à la ceinture sans tension excessive.

Tableau des tailles :

Taille	Mesure de la base de la verge jusque sous le périnée (cm)	Hauteur ceinture (cm)	Code ACL	Coloris
T1	11	2.5	34010 6051872 1	Blanc
T2	12		34010 6051889 9	
T3	13.5		34010 6051895 0	
T4	15		34010 6051903 2	
T5	16		34010 6051926 1	
T6	17.5		34010 6607625 6	
T7	19.5		34010 6607631 7	
T8	21		34010 6051932 2	
T9	23		34010 6051949 0	
T10	25.5		34010 6051955 1	
T11	28		34010 6051961 2	
T12	30		34010 6051978 0	



SUSPENSOIR FOURREAU POCHE INTERCHANGEABLE « 822 CELENO »

822 / ORMIHL

Conseils de stockage et d'entretien

Laver à la main, température recommandée 30° maximum, sans détergent ni blanchissant. Ne pas essorer.

Laisser sécher à plat à l'ombre sans repasser. Repositionner la pelote.

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri

de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière. Entretien des éléments textiles :

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.



Composition

Coton, polyester, gomme, acier.



SUSPENSOIR FOURREAU POCHE INTERCHANGEABLE « 822 CELENO »

822 / ORMIHL

Conseils de stockage et d'entretien


Laver à la main, température recommandée 30° maximum, sans détergent ni blanchissant. Ne pas essorer.

Laisser sécher à plat à l'ombre sans repasser. Repositionner la pelote.

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri

de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière. Entretien des éléments textiles :

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

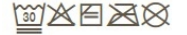

Composition

Coton, polyester, gomme, acier.

Groupe SOBER SAS

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France

Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06

Contact commercial : commercial@sober.fr - Contact utilisateur : groupesoberetvous@sober.fr

Date de mise à jour de la fiche : août -17 - Année d'apposition du marquage CE : 2016



www.sober.fr

Groupe SOBER SAS

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France

Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06

Contact commercial : commercial@sober.fr - Contact utilisateur : groupesoberetvous@sober.fr

Date de mise à jour de la fiche : août -17 - Année d'apposition du marquage CE : 2016



www.sober.fr